



シリカゲルチューブ 252S-20

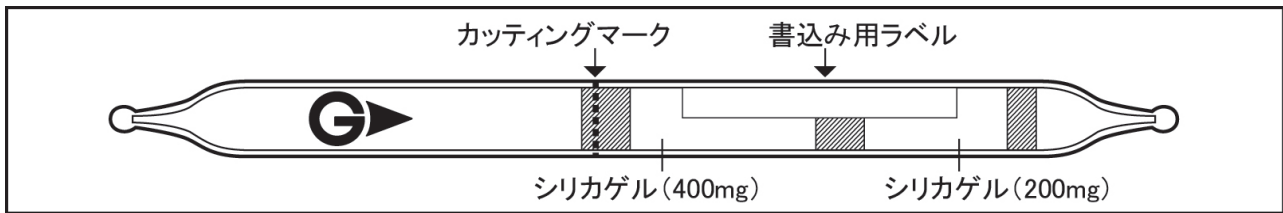

脱着率の例 (400mg - シリカゲル)

物質名		溶媒	溶媒量 (mL)	脱着率 (%)	変動係数 (%)
アルコール・ケトン	イソブチルアルコール	アセトン	3	97.0	1.1
	1-ブタノール	アセトン	3	97.1	1.1
	2-ブタノール	アセトン	3	96.2	1.1
	メチルエチルケトン	アセトン	3	97.7	1.0
	メチルイソブチルケトン	アセトン	3	106	4.9
	フルフリルアルコール	アセトン	2	98.0	4.7
酢酸エステル	酢酸メチル	アセトン	3	95.3	3.4
	酢酸エチル	アセトン	3	106	4.8
	酢酸ブチル	アセトン	3	107	5.0
	酢酸イソブチル	アセトン	3	107	5.1
	酢酸ペンチル	アセトン	3	107	5.0
	酢酸イソペンチル	アセトン	3	103	5.0
有機ハロゲン化合物	1,2-ジクロロエタン	アセトン	3	98.4	0.50
	トリクロロエチレン	アセトン	3	97.0	1.0
芳香族化合物	トルエン	アセトン	3	108	5.0
その他	シクロヘキサノン	アセトン	3	104	4.9
	m-クレゾール	アセトン	3	105	4.8
	ニトロベンゼン	エタノール	2	99.2	6.7

252S-20 圧力損失の一例

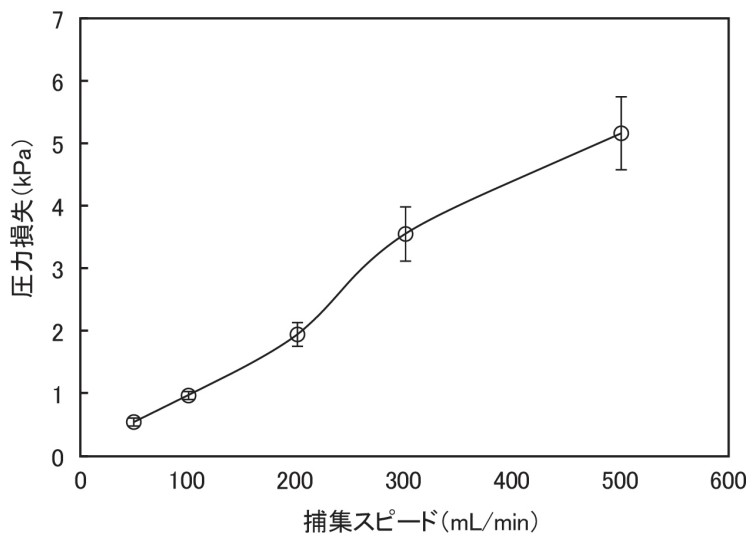

自動ガス採取装置の設定捕集スピードに対する圧力損失が定流量使用範囲を超えた場合、設定流量で吸引できなくなります。